

HAND LEADING



[INHOUDSOPGAVE]

INLEIDING	3
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	4
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	5
GEBRUIKSAANWIJZING	5
PRODUCTSPECIFICATIES	6
SPECIALE INSTRUCTIES	7
ONDERHOUD	8
TECHNISCHE INFORMATIE	8
GARANTIEVOORWAARDEN	9

[INLEIDING]

BEDANKT VOOR JOUW BESTELLING!

WIJ WAARDEREN JOUW AANKOOP EN WENSEN JOU VEEL TRAINPLEZIER MET DE BELLYATTACK®.

De BellyAttack® maakt gebruik van W.F.I.R. technologie. W.F.I.R. staat voor Wireless Infra Red. Vrij vertaald betekent het draadloze infrarood- dieptewarmte.

Neem voordat je de BellyAttack® gaat gebruiken even de tijd om deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig te lezen, zodat je optimaal kunt genieten van de BellyAttack®.

Raadpleeg de "Veiligheidsinstructies" om je veiligheid te garanderen.

Gebruik de BellyAttack® alleen volgens deze gebruikershandleiding.

Bewaar deze handleiding goed. Je hebt deze misschien later nodig.

Alle specificaties zijn nominaal en kunnen veranderen naarmate het ontwerp verbeterd. BellyAttack® is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van verkeerde toepassing of misbruik van haar producten.

 Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 89/336 / EU en is gemaakt in China. (EH-6701). MMX.

CONTACT

BellyAttack B.V.

Bijterhuizen 2160

6604 LG Wijchen

Web: www.bellyattack.com

E-mail: info@bellyattack.com

[VEILIGHEIDSINSTRUCTIES]

BELANGRIJKE INFORMATIE. BEWAAR DEZE HANDLEIDING.

GEbruik DE BELLYATTACK® NIET BIJ DE VOLGENDE SITUATIES:

1. Bij serieuze hartkwalen
2. Met medische apparaten zoals een Pacemaker, insulinepomp, etc.
3. Bij lokale huidaandoeningen
4. Bij zwangerschap
5. Bij huidallergieën. Bespreek met je huisarts
6. Bij overgevoeligheid voor warmte
7. Bij koorts of infecties
8. Bij hart, -hersenen, -of nier aandoeningen
9. Wanneer je recent geopereerd bent
10. Wanneer je misselijk of duizelig wordt bij gebruik van de BellyAttack®
11. Wanneer de batterij defect is. Retourneer de batterij naar de verkoper
12. Wanneer de stroomkabel beschadigd is. Contacteer in dat geval de verkoper
13. Wanneer de gebruiker onder de 16 jaar oud is.

Raadpleeg bij twijfel altijd je huisarts!

De BellyAttack® is niet bedoeld voor medisch gebruik.

Controleer de BellyAttack® regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als dergelijke tekens zichtbaar zijn of het apparaat is misbruikt, neem dan contact op met jouw plaatselijke dealer.

Bij misbruik of verkeerd gebruik kunnen batterijen/oplaadbare batterijen lekken en in extreme gevallen zelfs een explosie- en brandgevaar opleveren. De fabrikant/dealer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik.



Do not insert pins



Do not use when folded

[PRODUCT EIGENSCHAPPEN]


1. De binnenste laag van het product is een met toermalijn bedekt koolstofwarmtestof dat continu Far Infrared Ray (FIR) warmte uitstraalt met een comfortabele temperatuur en druk (**zie figuur 1 en 2 op pagina 6**). Het verwijdt de bloedvaten, wat de bloedcirculatie effectief verbetert, spiervermoeidheid verlicht, het cel metabolisme activeert, pijn veroorzaakt door kou verlicht en de weerstand tegen ziekten verbetert.
2. De kleine Li-ion batterij gaat 3 tot 6 uur mee na het opladen vanwege het lage stroomverbruik en het hoge verwarmingsrendement van de BellyAttack®.

[GEBRUIKSAANWIJZING]

1. Voordat je de BellyAttack® kunt gebruiken dien je de batterij volledig op te laden. De LEDS zullen blauw zijn wanneer de batterij volledig is opgeladen.
2. Verbind de batterij met de kabel van de BellyAttack®. (De kabel bevindt zich in het vakje op de voorkant van de BellyAttack® band, zie pagina 6, figuur 1, nummer 3). Zet de batterij aan door de ON/OFF knop ingedrukt te houden. Met deze knop kies je tevens de juiste intensiteit van de band door hier kort op te drukken (zie figuur 4) en plaats de batterij in het daarvoor bestemde vakje in de BellyAttack® (zie afbeelding figuur 3). De laagste stand is 25 en deze loopt op tot 100, dit is de meest warme stand.
3. Gebruik de speciale BellyAttack® lichaamsfolie om jouw buik.
4. Plaats de BellyAttack® om je buik en start jouw training. Normaal gesproken voel je de warmte op het meest intensieve niveau na ongeveer 10 minuten. De warmte stimuleert de bloedvaten waardoor de doorbloeding toeneemt.
5. Wanneer de LED uitgaat tijdens het gebruik moet de batterij volledig worden opgeladen.

[PRODUCT INSTRUCTIONS]

VOORKANT BELLYATTACK®

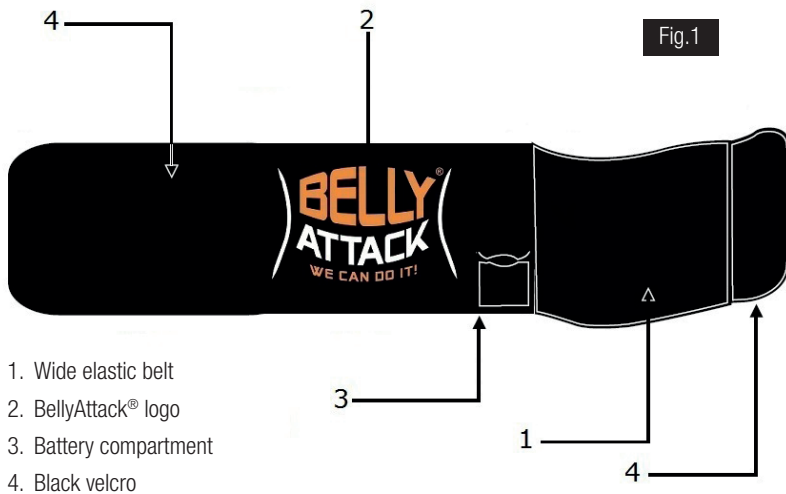

ACHTERKANT BELLYATTACK®

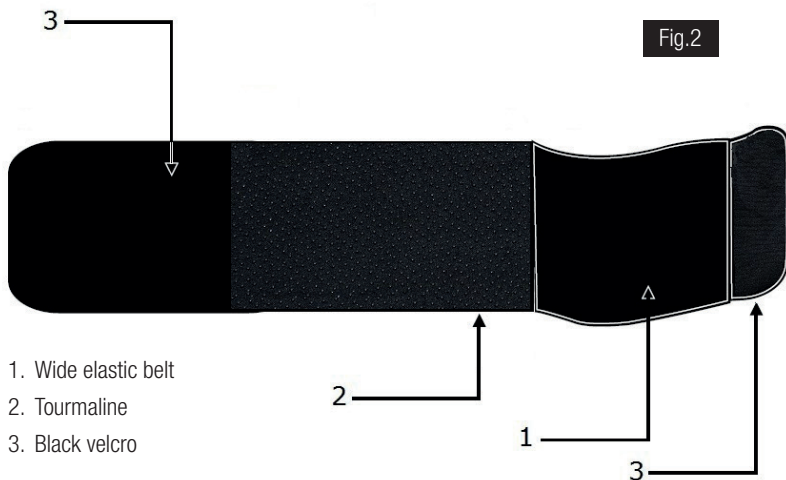


Fig.3



Fig.4



[SPECIALE INSTRUCTIES]

1. Er zijn geen bijwerkingen bij het gebruik van de BellyAttack® i.c.m. medicijnen.
2. Na het gebruik van de BellyAttack® kan jouw huid er rood uitzien en verwarmd blijven aanvoelen. Dit is normaal. Dit effect zal geleidelijk verminderen.

[ONDERHOUD]

1. Laat de BellyAttack® eerst afkoelen alvorens je deze opbergt. Wij adviseren je om de batterij volledig op te laden en van de oplader te halen. De batterij dient elke 90 dagen opgeladen te worden om een optimale werking te behouden.
2. Het is verboden om de batterij bloot te stellen aan vocht, water vuur of hoge temperaturen. Demonteer de batterij niet om letsel of beschadiging te voorkomen.
5. Verwijder de batterij voordat je de BellyAttack® reinigt. Je kunt de BellyAttack® reinigen met een vochtige doek. Dompel de BellyAttack® niet volledig onder in water. Gebruik geen wasmiddel, bleek of andere agressieve reinigingsmiddelen.
6. De batterij kan worden gerecycled. Lever de batterij in bij de daarvoor bestemde plaatsen.

[TECHNISCHE INFORMATIE]

A. CHARGER: MODEL #LBC-8412

1. Input voltage: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
2. Output voltage: 8.45 - 8.6 V DC
3. Output current: 0.9 - 1.1 A

B. SMART LI-ION BATTERY: MODEL ST-2S1P2.2AH-DVP

1. Battery voltage: 7.4V DC
2. Battery capacity: 2200 mAh
3. Output power: 15 W (max)
4. Output adjust by four step

C. PRODUCT DATA

1. Voltage: 7.4 V DC
2. Power: 5 W (max)

[GARANTIE VOORWAARDEN]

DE BELLYATTACK® IS GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN IS BIJ GEBRUIK VOLGENS DE INSTRUCTIES IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING OVER HET ALGEMEEN NIET SNEL TE BESCHADIGEN. DE GARANTIEPERIODE BEGINT OP DE AANKOOPDATUM VAN HET NIEUWE, ONGEBRUIKTE PRODUCT DOOR DE EERSTE GEBRUIKER. BEWAAR OM DEZE REDEN UW AANKOOPBEWIJS.

DE VOLGENDE GEVALLEN VALLEN NIET ONDER DE BOVENSTAANDE GARANTIE:

1. Kleine fouten of afwijkingen in de kwaliteit van een product die de waarde of geschiktheid van het product voor het beoogde doel niet beïnvloeden.
2. Alle accessoires die bij het product worden geleverd zijn uitgesloten van garantie
3. Oplaadbare batterij (dit product heeft een kortere levensduur, waarvan de lengte ook afhangt van de gebruiksfrequentie).
4. Storingen of beschadigingen als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijv. bedieningsfouten, mechanische schade, onjuiste netspanning). Correct gebruik in het kader van deze garantie wordt gedefinieerd als gebruik van het product onder de voorwaarden vermeld in de gebruiksaanwijzing.
5. Storingen of beschadigingen door slijtage
6. Elke wijziging van BellyAttack®-producten door jezelf of een derde partij, tenzij BellyAttack® vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de aard en omvang van de wijziging.
7. Storingen veroorzaakt door overmacht.
8. Storingen waarvan de koper op het moment van aankoop al op de hoogte was.
9. Je hebt het product niet goed onderhouden.

Elke vorm van garantie vervalt als het product niet op een normale manier gebruikt is en als er met het product is geknoeid door onbevoegde personen of reparatiewerkplaatsen.

Na de garantieperiode biedt BellyAttack® een reparatieservice tegen kostprijs. Neem voor reserveonderdelen, verbruiksartikelen (lichaamsfolie) voor extra of aankoop contact op met ons via info@bellyattack.com